

評価試験〔自動コロニーカウンター / 目視カウント〕

この資料は、Advanced Instruments 社による試験データの和訳版です。

試験日	: 2007 年 11 月 28 日
試験対象菌	: <i>Escherichia coli</i> AOCC #51813
培地種類	: Desoxycholate agar BD/Difco Lot #7169954 Exp. 2011-13-31

【培地準備】

寒天培地は製品取扱説明書に従って作成される。

45g の寒天ベースを試薬等級水 (Reagent grade water : NERL Lot #0839067 Exp 08-2008) に加え、攪拌しながら沸騰するまで加温し、寒天が溶解したら 1 分間沸騰。

溶解した寒天は、使用するまで 45℃ の水槽に設置。

【試験内容】

普通ブイヨンに *E.coli* を接種し、35℃ で一晚培養。

翌日、ブイヨン培地を 10⁻¹ ~ 10⁻⁸ に希釈し各希釈段階で 2 枚ずつプレートに接種し、Desoxycholate agar 20ml をそれぞれに加える。各培地をよくかき混ぜてから固める。

寒天が固まり次第 Desoxycholate agar 5ml を寒天表面に加えて重層させる。

重層された寒天培地を固め、培地を逆さの状態で 35℃ で一晚培養。

培養後、各プレートを目視カウント及びコロニーカウンター QCount での自動カウントを実施。

カウント可能な希釈段階のプレートをデータベースに保存。

【試験結果】

10⁻⁶ 希釈のプレート上のコロニー生育については、正常にはカウントできない様子。QCount による自動カウントが可能であることをデータベースに表示。

Image1 と Image2 は同じプレートであり、カウント数の再現性に一貫性がある事が、QCount による自動カウント試験データから伺える。

目視カウントの数値がやや高めであるのは、QCount では紫色サークルの領域内をカウントするのに対して、目視カウントではプレート全体をカウントするため。

【測定データ】

希釈	Image 1	Image 2	目視カウント
10 ⁻⁶	671 cfu	674 cfu	764 cfu
10 ⁻⁷	56 cfu	55 cfu	63 cfu
10 ⁻⁷ b	45 cfu	45 cfu	51 cfu
10 ⁻⁸	8 cfu	-----	6 cfu

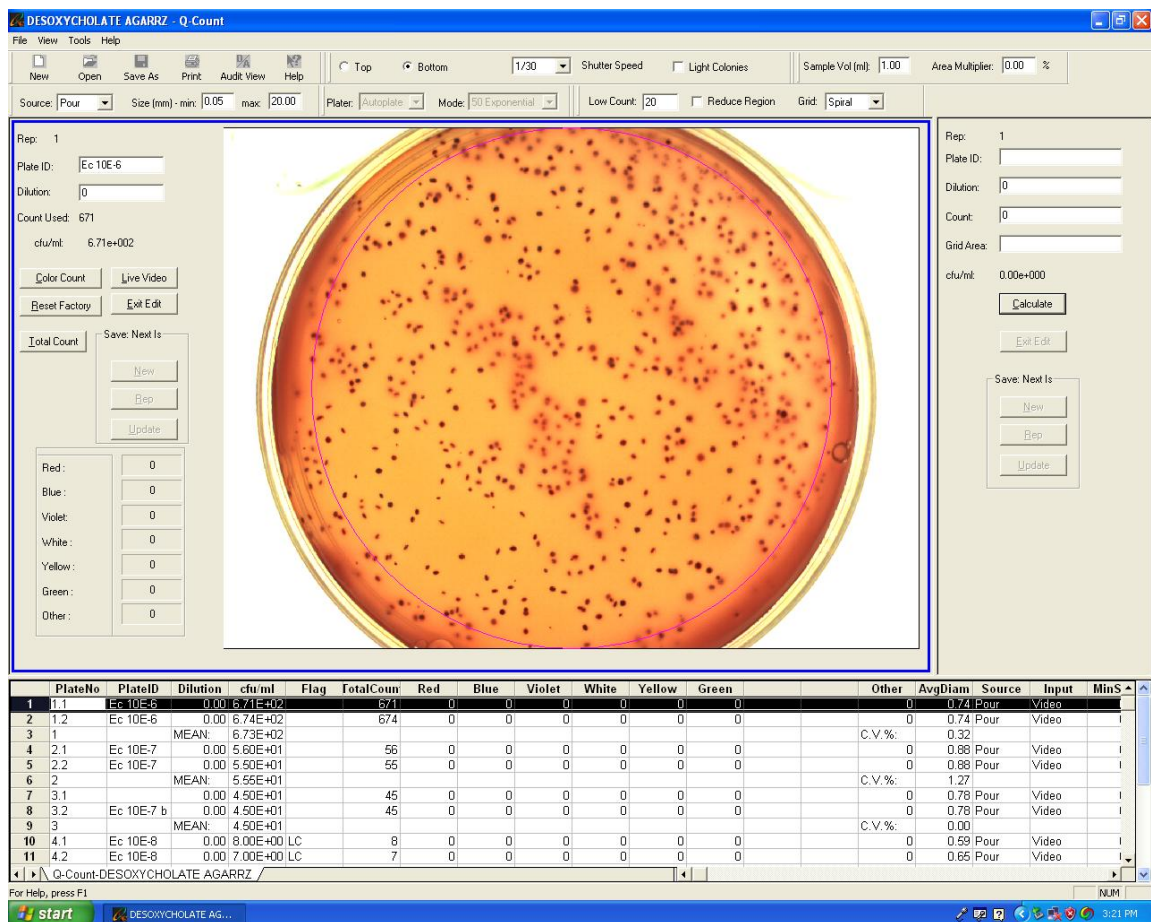


Figure 1.1 : 10^{-6} 希釈サンプル Image 1 (計測前)

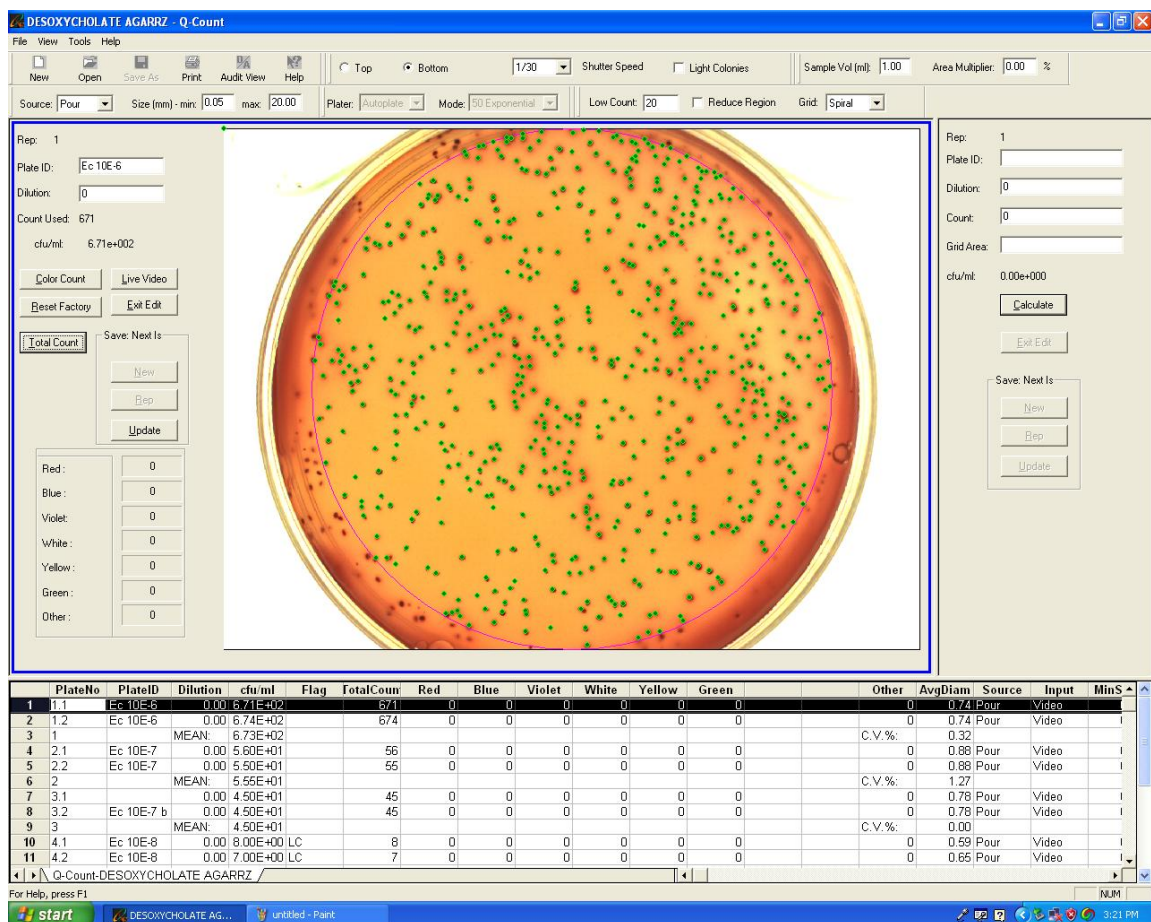


Figure 1.2 : 10^{-6} 希釈サンプル Image 1 (計測後)

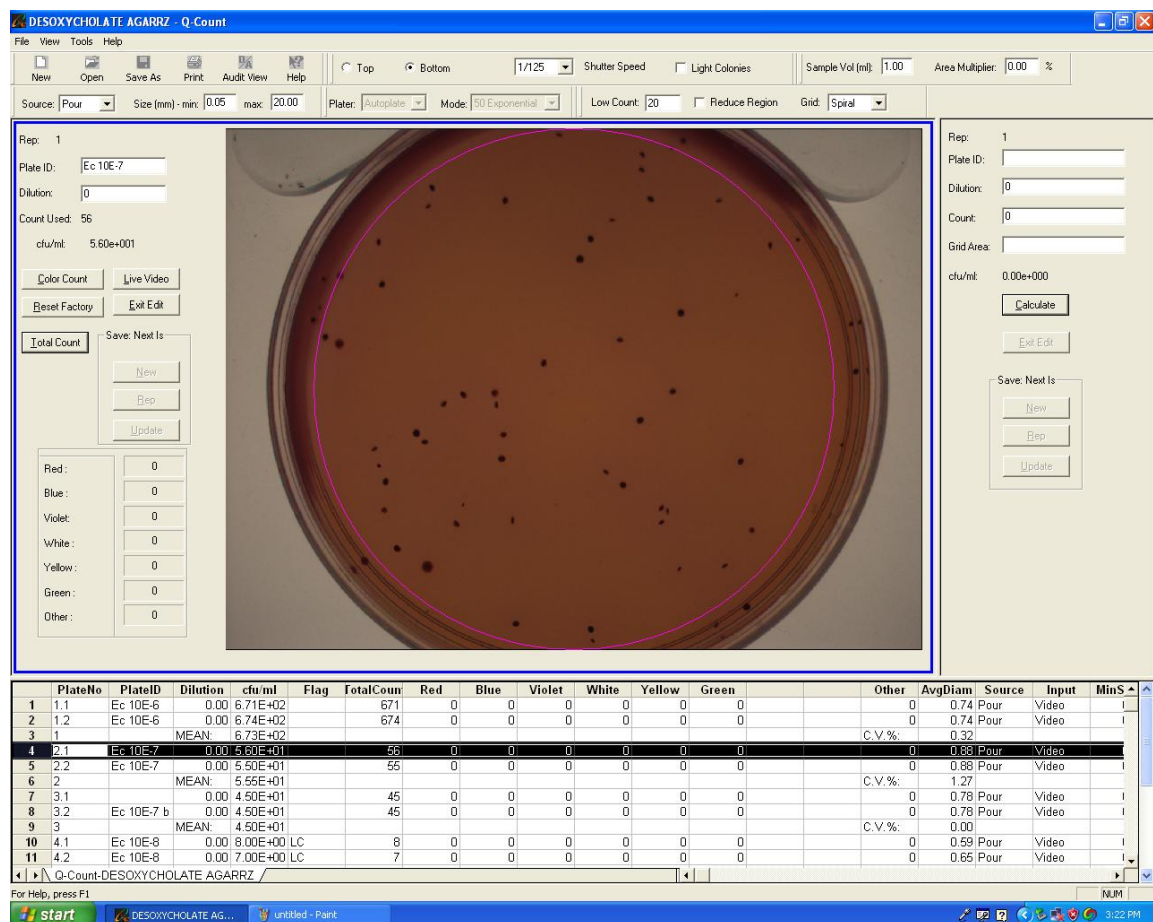


Figure 2.1 : 10^{-7} 希釈サンプル Image 1 (計測前)

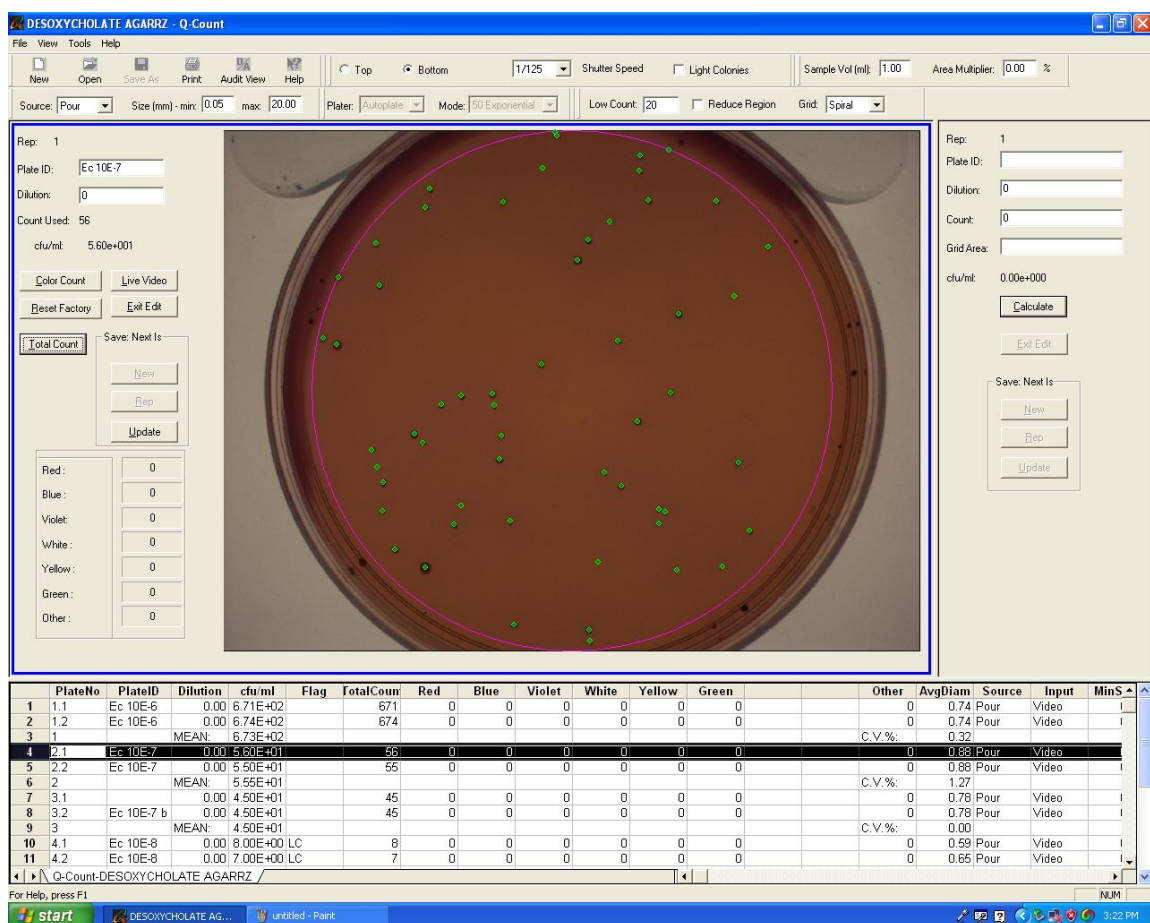


Figure 2.2 : 10^{-7} 希釈サンプル Image 1 (計測後)